

STERYLAB PRODUCT RANGE

Biopsy & localisation needles
Gynaecological products
Decontaminating mats for the O.R.
Aghi per biopsia e localizzazione
Prodotti per ginecologia
Tappeti decontaminanti

STERYLAB S.r.l.

VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY

Tel. +39-02 93508427 - Fax +39-02 93508426

sterylal@sterylal.it • www.sterylal.it



AGO PER ANESTESIA SUBARACNOIDEA
NEEDLE FOR SUBARACHNOID ANAESTHESIA

duraJECT®


■ Ago introduttore (a richiesta)
Introducer needle (on request)

■ Pareti non-coring
Rounded edges prevent coring

■ La speciale fessura permette
un ottimo flusso di anestetico
Special opening allows CSF
to flow freely

■ La punta ad ogiva penetra
tra le fibre della dura mater
senza tagliarle

■ Conical point spreads dura
fibers, doesn't cut

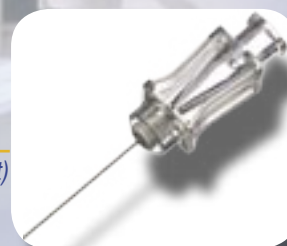

AGO PER ANESTESIA SUBARACNOIDEA NEEDLE FOR SUBARACHNOID ANAESTHESIA

 Il rischio di emicrania post-spinale può essere ridotto non solo con l'utilizzo di aghi sottili, ma anche mediante una diversa geometria della punta dell'ago.

► I due taglienti dei classici aghi per anestesia provocano un'incisione a "V" della *dura mater*.

► Gli aghi con "punta a matita" (pencil point) non hanno alcun tagliente. Il foro nella *dura mater* si può quindi ottenere più tramite dilatazione che tramite taglio.

► Basandosi sulle più avanzate tecniche di produzione STERYLAB ha sviluppato un nuovo ago spinale con punta ad ogiva. Moderate ma pur rilevanti differenze nella geometria hanno permesso di ottenere una punta ed una fessura di diffusione di grandezza e posizione ideali.

► Questo permette:
- buona individuazione del "dura-click"
- chiara differenziazione dei singoli strati di tessuto
- minima profondità di incisione col vantaggio di evitare lesioni al nervo

► La pluridecennale esperienza di STERYLAB come produttore di aghi speciali ha permesso l'ottimizzazione della geometria e della scelta del materiale di DURA-JECT®, ottenendo un'eccezionale capacità di flessione ed una buona stabilità della punta.

► DURA-JECT® consente:
- buona manualità
- ottimo riflusso del liquor
- leggera pressione di iniezione
- elevato tasso di riuscita e sicurezza

► DURA-JECT® è disponibile in una vasta gamma dimensionale in grado di soddisfare le diverse esigenze dell'operatore.

► AGO INTRODUTTORE
Su richiesta è disponibile, in abbinamento, lo specifico ago introduttore (vedi tabella dimensionale).

► Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali.

 The risk of post-spinal hemicrania, can be reduced not only by using fine needles, but also through a different geometry of the needle point.

► The two cutting edges of standard anaesthesia needles make a "V" incision of the *dura mater*.

► "Pencil-point" needles don't have any cutting edge. The hole through *dura mater* can therefore be performed more through dilatation than cutting.

► Using the most advanced manufacturing techniques, STERYLAB has developed a new pencil-point needle. Small but significant differences in tip geometry facilitate ideal needle placement.

► This allows:
- positive "dura-click" recognition
- clear differentiation of the different tissue layers
- minimal puncture depth and avoidance of nerve lesions

► Using our long experience of special needle manufacturing has allowed us to produce DURA-JECT®, with optimised and advanced tip geometry, increased flexibility and point stability, using the best materials available.

► DURA-JECT® allows:
- ease of use
- optimal liquor flow
- low injection pressure
- safety and high success ratio

► DURA-JECT® is available in a wide range of sizes to fulfil the needs of the operator.

► INTRODUCER NEEDLE
On request a specific introducer needle is available (see table of sizes).

► Sterile, single use: reduction of infection hazard.

MODELLI DISPONIBILI

AVAILABLE SIZES

duraJECT®

CALIBRO SIZE G (mm)	LUNGHEZZA LENGTH cm	CONFEZ. PCKG pz-units
22(0,70) - 23(0,65) - 24(0,55) 25(0,50) - 26(0,45) - 27(0,40)	7 - 9 - 11	25
Come comporre il codice d'ordine / ordering: DURA-JECT® 25 Gauge - 9 cm = DRJ2509 Versione con ago introduttore: aggiungere "I" al codice d'ordine / Model with introducer needle: add "I" to the cat. nr. Altre misure disponibili su richiesta / Other sizes available on request		

Emiss.: D.C. - Rev.: 09/2004



RAPPRESENTANTE DI ZONA:
AREA SALES REPRESENTATIVE:

STERYLAB S.r.l. • VIA MAGENTA 77/6 • 20017 RHO (MILANO) • ITALY
Tel. +39 - 02 93508427 - Fax +39 - 02 93508426 • sterylalab@sterylalab.it • www.sterylalab.it

